

# ANIOSPRAY QUICK

Disinfettante  
da spruzzare



- Soluzione pronta all'uso
- A base di etanolo
- Ampio spettro di attività in breve tempo
- Non lascia traccia all'asciugatura
- Odore gradevole
- Formulazione senza aldeidi, senza coloranti.

## INDICAZIONI

Disinfezione ad azione rapida dei dispositivi medici non immergibili, precedentemente puliti e resistente all'alcol (stetoscopi, cavi e connettori, sensori di pressione, tester glicemia, ecc.).

## CARATTERISTICHE

- Prodotto pronto all'uso
- Liquido limpido incolore
- Densità: circa 0,9
- pH a + 20 °C: circa 5,5

30 s.  
mini

PRONTO  
ALL'USO




# ANIOSPRAY QUICK

Disinfettante da spruzzare

## MODO D'USO

Utilizzare con un polverizzatore manuale ANIOS

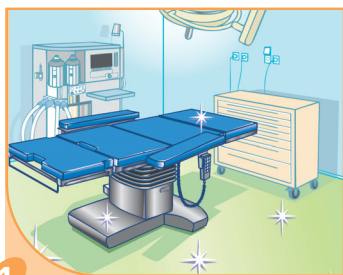

1 Pulire prima i dispositivi medici con l'ausilio di un detergente disinfettante ANIOS.



2 Polverizzare una pellicola uniforme sulle superfici dei dispositivi medici.



3 Tempo di contatto: 30 secondi minimo.

## COMPOSIZIONE QUALITATIVA

Soluzione idroalcolica (etanolo 55%), propionato di ammonio quaternario, profumo.

## PRECAUZIONI PER L'USO

Infiammabile – Rispettare le precauzioni per l'uso (stabilite ai sensi della Direttiva Europea 99/45/CE). Informazioni disponibili sulla Scheda dei dati di sicurezza e sull'etichetta.

Conservazione: da +5 a +25 °C.

Dispositivo medico di classe IIa (Direttiva 93/42/CEE modificata)

## CONFEZIONI

1 12 flaconi da 1 litro con 4 spruzzatori .....Rif. 2084.073

2 4 taniche da 5 litri .....Rif. 2084.034

## PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

Attivo su	Norme	Tempo di contatto
Batteri	EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697, SARM (EN 14561)	30 sec.
Micobatteri	Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563	30 sec.
	Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563	5 min.
Lievitati / Muffe	Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697.	30 sec.
	Tricophyton mentagrophytes (EN 14562)	
Virus	Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697.	5 min.
	Adenovirus, HIV-1, PRV (virus modello HBV), BVDV (virus modello HCV), Vaccinia virus*, Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H <sub>1</sub> N <sub>1</sub> )	30 sec.
	Calicivirus Felino	5 min.

\* RKI: Il Robert Koch Institute consiglia l'utilizzo di disinfettanti con l'indicazione "begrenzt viruzid wirksan", cioè con attività virucida limitata, per interrompere la catena di trasmissione. Secondo questo Istituto, l'attività virucida limitata corrisponde a un'attività sui virus di vaccino e BVDV.

