



IN SAFE HANDS

Reflexx S.p.A., Via Passeri 2, 46019 Viadana (MN) | ITALY

DISPOSABLE EXAMINATION NITRILE GLOVE

Reflexx N350
USER INFORMATION SHEET
rev. UIS 04 feb. 2022



CE 2797


PPE cat. III Reg. EU 2016/425 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B, EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) EN ISO 21420:2020

Table with 4 columns: Chemical compound, OOD, Performance level, Breakthrough time, EN374-4:2018, and % degradation. Lists various chemical tests like Sodium Hydroxide 40%, Sodium Hypochlorite 10-13%, etc.

Module D on going conformity by 2797 BSI Group The Netherlands B.V. - Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands EU type examination (Module B) by 2777, SATRA TECHNOLOGY EUROPE LIMITED, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 Y2NP, Ireland.

OTHER COMPLIANCE: - Medical Device CLASS I | Reg. EU 2017/745 - EN 455 1,2,3 & 4

Reg. CE 1935/2004 - Reg. UE 10/2011 - DM 21/03/1973 FOOD SAFE certified by: Chelab S.r.l., a Merieux NutriScience company Via Fratta, 25, 31023 RESANA (TV) Italy EN 374-4: 2013 Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.

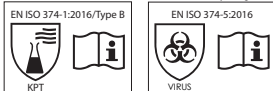

EN Declaration of Conformity on www.reflexx.com

Disposable examination nitrile glove ■ Powder free, non-sterile ■ Shape: ambidextrous; five fingers ■ Sizes: 6-10 ■ Please read this USER INFORMATION SHEET carefully before using the glove.

RECOMMENDATIONS OF USE

Multi-purpose glove to protect the hand and/or the handled product, can also be used for general uses... This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals... When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties...

WARNINGS

Before using the product, try it in the real condition of use... The glove is a device subject to wear, so frequent replacement is recommended... Store the gloves in their original packaging in a dry place...

STORAGE AND DISPOSAL

Store the gloves in their original packaging in a dry place... Do not expose to direct sunlight and heat sources... The expiry date is 3 years from the date of manufacture indicated on the sales package...

IT Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com

Guanto monouso in nitrile da esaminazione ■ Senza polvere, non sterile ■ Forma: ambidestro, cinque dita ■ Taglie: 6-10 ■ Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'utilizzo del guanto.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato ■ Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure... Conservare il prodotto in condizioni reali di uso...

chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela... Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perche... Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche...

AVVERTENZE

Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo... Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni... Non indossare i guanti con le mani asciutte e pulite...

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare nelle scatole originali al buio, in luogo asciutto... Non esporre alla luce diretta del sole e a fonti di calore... Durata del prodotto è di 3 anni dalla data di produzione riportata sulla pack ed è valida solo per il prodotto correttamente conservato...

FR

Déclaration de Conformité sur www.reflexx.com
Gants d'examen en nitrile ■ Non poudreux, non stériles ■ Forme: cinq doigts ambidextres ■ Tailles: 6-10 ■ Veuillez lire attentivement cette fiche d'INFORMATION UTILISATEUR avant d'utiliser le gant.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Gant polyvalent pour la protection de la main et/ou du produit manipulé... Cette information n'est que partielle... La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire... Avant l'emploi, inspecter les gants pour détecter tout défaut ou imperfection... La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé...

AVERTISSEMENTS

Avant d'utiliser le produit, l'essayer dans des conditions d'utilisation réelles... Matériel sujet à l'usure, à remplacer fréquemment... Porter les gants sur des mains sèches et propres... L'utilisateur doit signaler au fabricant et à l'autorité compétente d'éventuels incidents survenus pendant l'utilisation du dispositif de protection.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES GANTS

Entreposer les gants dans leur emballage d'origine, dans un milieu sec... Ne pas les exposer à l'alumière directe du soleil et à des sources de chaleur... La date d'expiration survient 3 ans après la date de production indiquée sur l'emballage de vente et s'applique pour le produit correctement stocké...

ES

Déclaration de Conformidad en www.reflexx.com

Guantes de examen de nitrilo ■ Sin polvo. No estériles ■ Tamaño: ambidiestro; cinco dedos ■ Tallas: 6-10 ■ Lea atentamente la presente informativa antes proceder al uso.

PRECAUCIONES DE USO

Guante polivalente para proteger la mano y/o el producto manipulado... Esta información no refleja la duración efectiva de la protección en el lugar de trabajo ni la distinción entre mezclas y sustancias químicas puras... Antes de utilizarlos, inspeccione los guantes para detectar posibles defectos o imperfecciones... La resistencia a la penetración se ha evaluado bajo condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra analizada...

ADVERTENCIAS

Probar el producto en condiciones reales de uso antes de utilizarlo... Dispositivo sujeto a desgaste, se recomienda el cambio frecuente y siempre que se observen imperfecciones... No exponer los guantes en un lugar seco... Conservar el producto en condiciones reales de uso...

CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS GUANTES

Guardar los guantes en su envase original en un lugar seco... No exponer los

